

CAMAS DE HOSPITAL



CAMA ELECTRICA DE 2 POSICIONES

MCA. BESTRAN MODELO MT-AE202



CARACTERISTICAS

- 1) Medidas (L * W * H): 2150 * 950 * 550mm
- 2) Marco de acero laminado, con pintura electrostática,, resistente a bacterias y polvo
- 3) Cabecera desmontable ABS / pie de cama, con la tarjeta de plástico nombre del paciente
- 4) Piecera 4-pieza de acero
- 5) Barandales de al-aleación plegables
- 6) Motor eléctrico
- 7) Control de Mando a distancia de todas las funciones y movimientos operados eléctricamente
- 8) Estructura diseñada para soportar un peso de hasta 200 kg
- 9) Cuatro ruedas con frenos silenciosos transversales, $\phi 125\text{mm}$
- 10) Motor: Mca Timotion
- 11) Con una altura de polo ss i.v. ajustable, con el gancho venoclisis

2 Posiciones

:

- 1) Respaldo máximo ángulo ascendente: 75°
- 2) reposapiés máximo ángulo ascendente: 40°

CAMA ELECTRICA DE 3 POSICIONES ELITE

MCA. BESTRAN

MODELO. MT-AE114



CARACTERISTICAS

- 1) Medidas (L * W * H): 2150 * 980 * (460-750) mm
- 2) Marco de acero laminado, con pintura electrostática,, resistente a bacterias y polvo
- 3) Cabecera desmontable ABS / pie de cama, con la tarjeta de plástico nombre del paciente
- 4) Piecera de 4 partes de acero con junta blanda abs
- 5) Cuatro piezas de barandillas desmontables ABS
- 6) Actuadores eléctricos tranquilas y robustas proporcionan un funcionamiento fiable
- 7) Control de Mando a distancia de todas las funciones y movimientos operados eléctricamente
- 8) Construcción robusta totalmente probado capaz de tomar un peso máximo del usuario de hasta 250 kg
- 9) Cuatro ruedas con frenos silenciosos transversales, $\phi 125\text{mm}$
- 10) Motor: Motor Timotion
- 11) Con una altura de polo ss i.v. ajustable, con el gancho venoclisis

3 funciones:

- 1) Respaldo máximo ángulo ascendente: 75°
- 2) reposapiés máximo ángulo ascendente: 40°
- 3) Ajuste de altura: 450-750mm

CAMA ELECTRICA DE 3 POSICIONES BASIC

MCA. BESTRAN MODELO. MT-AE105



CARACTERISTICAS

- 1) Medidas (L * W * H): 2000 * 970 * (500-750) mm
- 2) Marco de acero laminado, con pintura electrostática,, resistente a bacterias y polvo
- 3) Cabecera desmontable ABS / pie de cama, con la tarjeta de plástico nombre del paciente
- 4) Piecera 4-pieza de acero
- 5) Barandillas 6-rank de aleación
- 6) Motor eléctrico
- 7) Control de Mando a distancia de todas las funciones y movimientos operados eléctricamente
- 8) Construcción robusta totalmente probado capaz de tomar un peso máximo del usuario de hasta 200 kg
- 9) Cuatro ruedas con frenos silenciosos transversales, $\phi 125\text{mm}$
- 10) Motor: Motor Timotion
- 11) Con una altura de polo ss i.v. ajustable, con el gancho venoclisis

3 funciones:

- 1) Respaldo máximo ángulo ascendente: 75°
- 2) reposapiés máximo ángulo ascendente: 40°
- 3) Ajuste de altura: 500-750mm

CAMA ELECTRICA DE 5 POSICIONES CON TRENDELEMBURG E

MCA. BESTRAN

MODELO. MT-AE010



CARACTERISTICAS

- 1) Medidas (L * W * H): 2120 * 950 * (450-750) mm
 - 2) Marco de acero laminado, con pintura electrostática,, resistente a bacterias y polvo
 - 3) Cabecera desmontable ABS / pie de cama, con la tarjeta de plástico nombre del paciente
 - 4) Piecera 10-pieza de acero
 - 5) Cuatro piezas de barandillas desmontables ABS
 - 6) Actuadores eléctricos tranquilas y robustas proporcionan un funcionamiento fiable
 - 7) Control de Mando a distancia de todas las funciones y movimientos operados eléctricamente
 - 8) Construcción robusta totalmente probado capaz de tomar un peso máximo del usuario de hasta 250 kg
 - 9) Cuatro ruedas silenciosas con sistema de frenado centro-controlado, $\phi 125\text{mm}$
 - 10) Motor Timotion
 - 11) Con una altura de polo ss i.v. ajustable, con el gancho de drenaje
- 5 funciones:

- 1) Respaldo máximo ángulo ascendente: 75°
- 2) reposapiés máximo ángulo ascendente: 40°
- 3) Ajuste de altura: 450-750
- 4) Trendelenburg: 12°
- 5) Anti-Trendelenburg: 12°

CAMA ELECTRICA DE 5 POSICIONES CONTRENDELEMBURG B MCA. BESTRAN MODELO. MT-AE015



CARACTERISTICAS

- 1) Medidas (L * W * H): 2150 * 950 * 380-720mm
- 2) Estructura: acero, tratada para repeler arena y el polvo-balsting-revestimiento electrostático
- 3) Cabecera: acero, de 4 piezas
- 4) Pie de cama: ABS, desmontable
- 5) Carril lateral: 6-rank al-aleación desmontable
- 6) Controlador de Auricular: a distancia, móvil
- 7) Motor: Timotion
- 8) Ruedas: ruedas con frenos silenciosos crosss $\phi 125\text{mm}$
- 9) Soporta hasta un Peso: 250 kg
- 10) Accesorios estándar: 1pc i.v. polo, polo IV agujeros 4pcs, ganchos de drenaje 2pcs

5 funciones:

- 1) Respaldo máximo ángulo ascendente: 70°
- 2) reposapiés máximo ángulo ascendente: 30°
- 3) Ajuste de altura: 380-720mm
- 4) Trendelenburg: 12°
- 5) Anti-Trendelenburg: 12°

CAMA MANUAL DE 2 POSICIONES

MCA. BESTRAN

MODELO. MT-AM213



CARACTERISTICAS

- 1) Medidas (L * W * H): 2160 * 960 * (500-750) mm
- 2) el marco duradero: de chapa de acero laminado en frío, tratado mediante electro-recubrimiento y aplicación de recubrimiento en polvo
- 3) cabecero desmontable ABS / pie de cama, con la tarjeta de plástico nombre del paciente
- 4) Cabecera 4-pieza de acero
- 5) barandillas 6-manivela Al-aleación
- 6) Completamente probado construcción robusta capaz de tomar un peso máximo del usuario de hasta 250 kg
- 7) Cuatro ruedas con frenos silenciosos transversales, $\phi 125$ mm
- 8) Con una altura de polo ss i.v. ajustable, con el gancho de drenaje

3 funciones:

- 1) Respaldo máximo ángulo ascendente: 75 °
- 2) reposapiés máximo ángulo ascendente: 40 °
- 3) Ajuste de altura: 500-750mm

CAMA MANUAL DE 3 POSICIONES

MCA. BESTRAN

MODELO. MT-AM106



CARACTERISTICAS

- 1) Medidas (L * W * H): 2150 * 950 * 550mm
- 2) Marco de acero laminado, con pintura electrostática,, resistente a bacterias y polvo
- 3) Cabecera desmontable ABS / pie de cama, con la tarjeta de plástico nombre del paciente
- 4) Piecera 4-pieza de acero
- 5) Barandales de al-aleación plegables
- 6) Motor eléctrico
- 7) Control de Mando a distancia de todas las funciones y movimientos operados eléctricamente
- 8) Estructura diseñada para soportar un peso de hasta 200 kg
- 9) Cuatro ruedas con frenos silenciosos transversales, $\phi 125\text{mm}$
- 10) Motor: Mca Timotion
- 11) Con una altura de polo ss i.v. ajustable, con el gancho de drenaje

2 Posiciones

:

- 1) Respaldo máximo ángulo ascendente: 75°
- 2) reposapiés máximo ángulo ascendente: 40°

CAMA ORTOPEDICA MODELO. MT-A0005

MCA. BESTRAN



CARACTERISTICAS

- 1) Medidas (L * W * H): 2160 * 99
 - 2) el Marco duradero: de chapa de acero laminado en frío, tratado mediante electro-recubrimiento y aplicación de recubrimiento en polvo
 - 3) Cabecera ABS / pie de cama, con la tarjeta de plástico nombre del paciente
 - 4) Cabecera acero, el reposapiés se separa de las piernas izquierda y derecha
 - 5) barandillas 6-manivela Al-aleación, con el tablero de comedor estirable
 - 6) Completamente probado construcción robusta capaz de tomar un peso máximo del usuario de hasta 250 kg
 - 7) sistema de frenado controlado central, ruedas $\phi 125\text{mm}$
 - 8) Con una altura de polo ss i.v. ajustable, con el gancho de drenaje
 - 9) Con el marco de Ortopedia
- 3 funciones:
- 1) Respaldo máximo ángulo ascendente: 75°
 - 2) Estribo derecho máximo ángulo ascendente: 40°
 - 3) Estribo izquierdo máximo ángulo ascendente: 40°

QUIROFANO



MESA DE CIRUGIA MANUAL

MCA. BESTRAN

MODELO. MT-RA020



CARACTERISTICAS

Adecuado para rayos X, 304 de cubierta y la columna cubierta de la base de acero inoxidable, mesa de una sola capa superior, la placa de

Dimensiones de la mesa: 2040 * 480 * 800-1000mm

Las dimensiones de las secciones:

Reposacabezas: 280 x 320 (mm), Volver sección: 500 x 480 (mm), Puente de riñón: 84 x 470 (mm), Asiento Sección: 370 x 480 (mm), la sección de la pierna: 510 x 240 (mm), el resto del pie: 200 x 240 (mm)

Gama de movimientos:

Max. Invertida Trendelenburg: $\geq 50^{\circ}$

Max. Trendelenburg $\geq 30^{\circ}$

Max. Lateral Tilt $\geq 20^{\circ}$

Los ajustes de las secciones:

Reposacabezas-resucitado de entre los $^{\circ}$ horizontal ≥ 30

Reposacabezas-baja de las $^{\circ}$ horizontal ≥ 90

Volver Sección-resucitado de entre los $^{\circ}$ horizontal ≥ 80

Volver Sección-bajada de las $^{\circ}$ horizontal ≥ 8

Puente de riñón Elevation ≥ 80 mm

Pierna-Sección baja de las $^{\circ}$ horizontal ≥ 90

$^{\circ}$ la pierna Sección-opened ≥ 50

El resto del pie-puede mantenerse horizontal o perpendicularmente a la sección de las piernas.
de carga máxima: 135 kg

MESA DE CIRUGIA MANUAL HIDRAULICA MCA. BESTRAN MODELO. MT-RA003



CARACTERISTICAS

- Dimensión Tabla incluyendo los rieles: longitud 2040mm, anchura 540mm
- Tabla dimensión superior: longitud 210 mm, anchura de 500 mm
- Altura de la mesa: lowest≤830mm, highest≥1070mm
- Inclinación lateral: left≥15 ° right≥15
- Trendelenburg y Trendelenburg: revertir trend≥25 ° trend≥15
- Sección de la cabeza de inflexión: up≥28 ° down≥45
- Volver sección de inflexión: up≥70 ° down≥15
- Sección de las piernas bajando: ≥ 70 °
- Sección de las piernas giran hacia afuera: ≥90 °
- Apoyabrazos abren hacia afuera: ≥90 °
- Distancia de riñón puente de elevación: 150 mm

Accesorios estándar :


- Anestesia pantalla del marco I juego

Correa cuerpo I pieza

- Apoyo lateral de I par
- En caso de soporte I par
- Pata de soporte I par
- I juego de la abrazadera
- Apoyabrazos I par

MESA DE CIRUGIA CON MOTOR ELECTRICO

MCA. BESTRAN MODELO. MT-RAD15

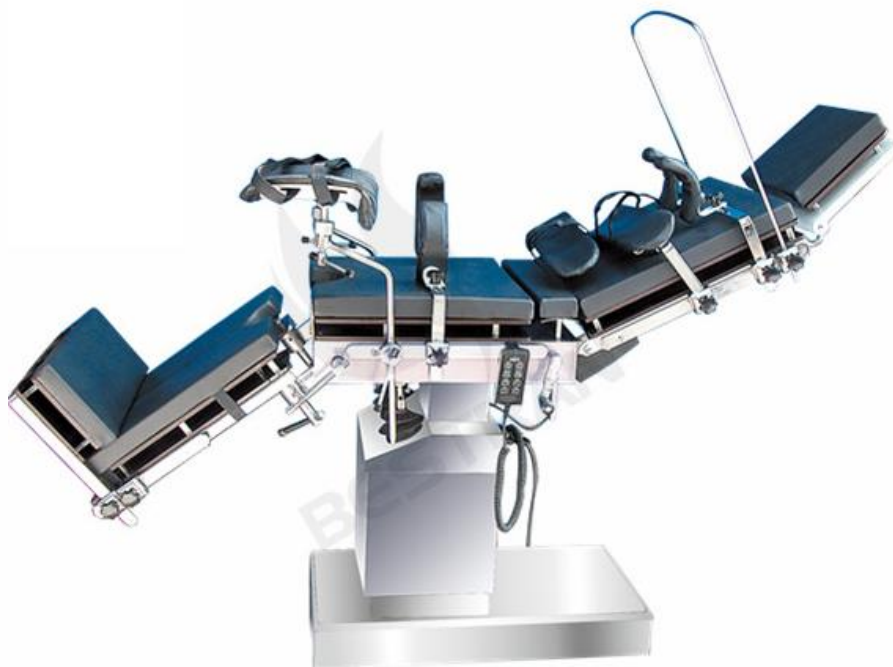

CARACTERISTICAS

Con energía de emergencia, adecuados para rayos X
 Dimensión total de la mesa: 2100 * 480 * 750-1000mm
 Dimensión de la sección:
 Medidas de Sección: 280 x 325 mm; Volver Sección: 500 x 480 mm, la sección del asiento: 530 x 480 mm; Pierna Sección: 510 x 236 mm; Foot Sección: 180 x 273mm; Puente de riñón: 100 x 480 mm
 Gama de movimientos:
 Invertida Trendelenburg..... >200
 Trendelenburg..... >150
 Con inclinación lateral..... >150

Sección cabeza levantada respecto a la horizontal >450
 Sección cabeza baja respecto a la horizontal >900
 Sección pierna rebajado respecto de la horizontal >900
 Sección pierna abrió >900
 Sección Volver Criado desde la horizontal >450
 Volver Sección bajo desde la horizontal >150
 Riñón puente elevado >100mm
 135kg de carga de trabajo segura
 Velocidad de elevación 4 ~ 16 mm / s
 Pie con tabla tablero de la pierna en un horizontal o vertical.
 IPX4 Protección de entrada: IPX4
 Potencia: AC220V, 50Hz
 Fuente eléctrica interna: (CC) 24V
 Capacidad de la batería 2,4 Ah ≥ tipo de dispositivo de seguridad I
 B

MESA DE CIRUGIA MANUAL ELITE MCA. BESTRAN

MODELO. MT-RAD19



CARACTERISTICAS

Adecuado para rayos X, 304 de cubierta y la columna de la cubierta base de acero inoxidable, mesa de doble capa superior de la pierna.

Dimensiones de la mesa: 2040 * 480 * 800-1000mm

Las dimensiones de las secciones:

Reposacabezas: 280 × 320 (mm), Volver sección: 500 × 480 (mm), Puente de riñón: 84 × 470 (mm), Asiento Sección: 370 × 480 (mm), la sección de la pierna: 510 × 240 (mm), el resto del pie: 200 × 240 (mm)

Gama de movimientos:

Max. Invertida Trendelenburg: $\geq 50^{\circ}$

Max. Trendelenburg $\geq 30^{\circ}$

Max. Lateral Tilt $\geq 20^{\circ}$

Los ajustes de las secciones:

Reposacabezas-resucitado de entre los $^{\circ}$ horizontal ≥ 30

Reposacabezas-baja de las $^{\circ}$ horizontal ≥ 90

Volver Sección-resucitado de entre los $^{\circ}$ horizontal ≥ 80

Volver Sección-bajada de las $^{\circ}$ horizontal ≥ 8

Puente de riñón Elevation ≥ 80 mm

Pierna-Sección baja de las $^{\circ}$ horizontal ≥ 90

$^{\circ}$ la pierna Sección-opened ≥ 50

El resto del pie-puede mantenerse horizontal o perpendicularmente a la sección de las piernas.

de carga máxima: 135 kg

MESA DE QUIROFANO OBSTETRICA
MCA. BESTRAN

MODELO. MT-DE014



CARACTERISTICAS

Longitud total: 2000 mm

Ancho: 600 mm

Altura: 620 mm

Elevación gama $\geq 240^\circ$

Tabla superior se incline hacia adelante $\geq 22^\circ$

Tabla superior se inclina hacia atrás $= 8^\circ$

Tablero trasero plegable hasta $\geq 70^\circ$

Tablero trasero plegable hacia abajo $\geq 10^\circ$

Accesorios

pantalla de la anestesia

seguidor de hombro

seguidor de la pierna

seguidor de brazo

Colchón

Pedal

LAMPARA DE CIRUGIA 2 SATELITES SIN SOMBRA MCA. BESTRAN MODELO. MT-700/500



CARACTERISTICAS

Adecuado para rayos X, 304 de cubierta y la columna de la cubierta base de acero inoxidable, mesa de doble capa superior de la pierna.

Dimensiones de la mesa: 2040 * 480 * 800-1000mm

Las dimensiones de las secciones:

Reposacabezas: 280 × 320 (mm), Volver sección: 500 × 480 (mm), Puente de riñón: 84 × 470 (mm), Asiento Sección: 370 × 480 (mm), la sección de la pierna: 510 × 240 (mm), el resto del pie: 200 x 240 (mm)

Gama de movimientos:

Max. Invertida Trendelenburg: $\geq 50^{\circ}$

Max. Trendelenburg $\geq 30^{\circ}$

Max. Lateral Tilt $\geq 20^{\circ}$

Los ajustes de las secciones:

Reposacabezas-resucitado de entre los $^{\circ}$ horizontal ≥ 30

Reposacabezas-baja de las $^{\circ}$ horizontal ≥ 90

Volver Sección-resucitado de entre los $^{\circ}$ horizontal ≥ 80

Volver Sección-bajada de las $^{\circ}$ horizontal ≥ 8

Puente de riñón Elevation ≥ 80 mm

Pierna-Sección baja de las $^{\circ}$ horizontal ≥ 90

$^{\circ}$ la pierna Sección-opened ≥ 50

El resto del pie-puede mantenerse horizontal o perpendicularmente a la sección de las piernas.

de carga máxima: 135 kg

LAMPARA DE CIRUGIA 2 SATELITES SIN SOMBRA
MCA. BESTRAN MODELO. MT-700/500M



CARACTERISTICAS

Luminancia: 120,000Lux ~ 180,000Lux
70,000Lux ~ 120,000Lux
Temperatura de color: 4300 ± 500 K
Diámetro del punto: 150 ~ 300 (mm)
Profundidad de iluminación: ≥800 (mm)
Modo de luz de marcha: Ocho de grado sistema de dimmer
Temperatura a la cabeza del cirujano: ≤2º
Fuente de alimentación: 220V 50Hz ~
La potencia de entrada: 460VA
Bulbo de la energía: 150W (700) 100W (500)
Lámpara del tiempo de cambio automático: 0.2S
Índice de indicación de color: ≥97%
Seis dimensiones conjunta: 360º
Menor altura de montaje: 2600mm

LAMPARA DE CIRUGIA 2 SATELITES SIN SOMBRA
MCA. BESTRAN MODELO. MT-700/700



CARACTERISTICAS

Luminancia: 120,000Lux ~ 180,000Lux
120,000Lux ~ 180,000Lux
Temperatura de color: 4300 ± 500 K
Diámetro del punto: 150 ~ 300 (mm)
Profundidad de iluminación: ≥800 (mm)
modo de luz de marcha: Ocho de grado sistema de dimmer
Temperatura a la cabeza del cirujano: ≤2º
Fuente de alimentación: 220V 50Hz ~
La potencia de entrada: 560VA
Bulbo de la energía: 150W
Lámpara del tiempo de cambio automático: 0.2S
Índice de indicación de color: ≥97%
Seis dimensiones conjunta: 360º
menor altura de montaje: 2600mm



CAMILLAS



TL. 01800 8908 518

www.medicaltechnology.com.mx

CAMILLA PLEGABLE DE ALUMINIO MCA. MEDICAL MODELO. CMA

CARACTERISTICAS

- * Material de alta resistencia de aleación de aluminio y materiales de cuero estanqueidad al agua.
- * Peso ligero, de pequeño tamaño, y llevado fácil.
- * Fácil para el uso y la esterilización.
- * De uso general en el hospital, gimnasio, ambulancia, y el ejército para llevar a los pacientes y los heridos.

Presupuesto:

Modelo Tamaño del producto


(L * W * H) Tamaño doblado

(L * W * H) Tamaño del embalaje

(2pcs) Cargando

Teniendo N.W G.W

185 * 50 * 3 cm 92,5 * 50 * 7 cm 96 * 54 * 18 cm ≤159kg 4 kg 9 kg

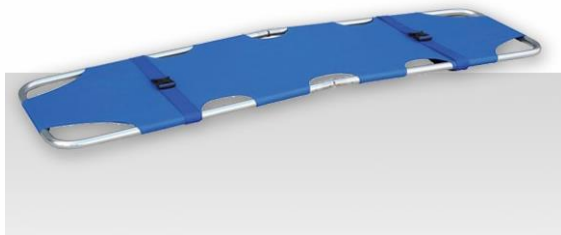

CAMILLA INMOVILIZADORA COLUMNA VERTEBRAL MCA. MEDICAL MODELO. CIC

CARACTERISTICAS

- * El tablero de la espina dorsal se utiliza comúnmente para transportar con seguridad seriamente herido e inmóvil.
- * Puede flotar en el agua, permitió rayos X y también se utiliza junto con inmovilizador de cabeza.
- * Hecho de plástico de alta resistencia de ingeniería, este tablero de columna es duradera, anti-envejecimiento, carga de peso y fácil para el almacenamiento.
- * Es un debe tener en el equipo de primeros auxilios para centros médicos.

Características técnicas:


Modelo Tamaño del producto

(L * W * H) Tamaño del embalaje

(1pcs) Cargando

Teniendo N.W G.W

183 * 45 * 5cm 185 * 47 * 7cm ≤159kg 7.5kg 9kg

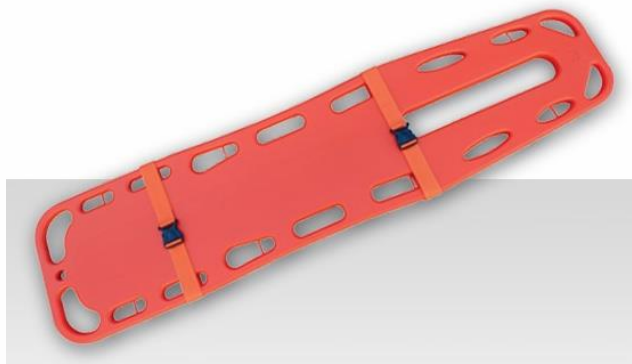

CAMILLA DE EMERGENCIA DE ALUMINIO MCA. MEDICAL MODELO. CEA

CARACTERISTICAS



- * Hecho del tubo de alta resistencia de la pared gruesa de la aleación de aluminio.
- * Superficie se puede separar de la cama, y se puede utilizar como una camilla.
- * Altura ajustable por la manija en el lado de la cabeza.
- * La cabeza puede elevarse hasta 60°.
- * Se utiliza para transportar pacientes y heridos a los hospitales, centros de emergencia y gimnasios.
- * Luz, durable, antiséptico y fácil para la esterilización.



CAMILLA DE AMBULANCIA MCA. MEDICAL MODELO. CAB

CARACTERISTICAS



- * El tablero de la espina dorsal se utiliza comúnmente para transportar con seguridad seriamente herido e inmóvil.
- * Puede flotar en el agua, permitió rayos X y también se utiliza junto con inmovilizador de cabeza.
- * Hecho de plástico de alta resistencia de ingeniería, este tablero de columna es duradera, anti-envejecimiento, carga de peso y fácil para el almacenamiento.
- * Es un debe tener en el equipo de primeros auxilios para centros médicos.

Características técnicas:

Model High Position

(L*W*H) Low Position

(L*W*H) Adjusted

Size Packing Size

(1pcs) Loading

Bearing N.W G.W

190*55*88cm 190*55*40cm 190*55*72cm 195*62*42cm
≤159kg 34.5kg 40.5kg



CAMILLA DE AMBULANCIA AVANZADA MCA. MEDICAL MODELO. CAA



CARACTERISTICAS

- * Este estiramiento de carga automático es nuestro nuevo producto diseñado, está hecho de acero inoxidable y aleación de aluminio.
- * La superficie de la cama está hecha de cojín de espuma y la espalda ajustable haciendo que el herido se sienta cómodo.
- * La máquina es muy conveniente, una persona es suficiente para enviar al paciente a la camilla de la ambulancia.
- * Las patas mecánicas plegables están controladas por las manijas en ambos extremos de la camilla.
- * Y las piernas se pueden plegar debajo de la camilla automáticamente al cargar en el vehículo.
- * También la camilla se puede bloquear por los dispositivos de fijación cuando en el coche de la ambulancia.
- * Este tipo de camilla se caracteriza por ser ligero, durable antiséptico fácil para la esterilización.



CAMILLA DE TRANSFERENCIA MANUAL MCA. BESTRAN MODELO. MT-TR002



CARACTERISTICAS

Tamaño: 1930 * 640 * 540-840mm

Especificación:

- 1) El marco es de acero, barandillas abs
- 2) La plataforma inferior es material importado de los PP
- 3) Con la manija del CPR
- 4) Ruedas de guía de elevación y descenso
- 5) Con I.V. Polo, 6cm thickness colchón
- 6) Capacidad de carga máxima: 150kgs
- 7) La sección trasera está controlada por el resorte
- 8) Función de bloqueo con sistema de bloqueo central

2 funciones:

- 1) Ángulo de inclinación máximo del respaldo: 75 °
- 2) Ajuste de altura: 540-840mm

CAMILLA DE TRANSFERENCIA HUDRAHULICA MCA. BESTRAN MODELO. BT-TR001

CARACTERISTICAS

Tamaño: 2100 * 850 * 630-950mm

Material:

- 1) Dos bomba hidráulica americana separada
- 2) El marco es acero, pasamanos de la aleación de aluminio,
- 3) Con la manija del CPR
- 4) El tablero posterior es con el cassette de la radiografía
- 5) La plataforma inferior es material de acero
- 6) Panel de control hidráulico
- 7) Ruedas de guía de elevación y descenso
- 8) Con I.V. Polo, 8cm thickness PU cubierta de prueba de agua colchón
- 9) Capacidad de carga máxima: 150kgs
- 10) La sección posterior es controlada por el resorte, el resto del pie controlado manualmente
- 11) Función de bloqueo con cierre centralizado

5 funciones:

- 1) Ángulo de inclinación máximo del respaldo: 75 °
- 2) Reposapiés Max ángulo ascendente: 45 °
- 3) Ajuste de altura: 630-950mm
- 4) Trendelenburg: 15 °
- 5) Anti-trendelenburg: 15 °



CAMILLA DE TRANSFERENCIA HIDRAULICA DE LUJO MCA. BESTRAN MODELO. MT-TR006



CARACTERISTICAS

Tamaño: 2100 * 850 * 630-950mm

Material:

- 1) Dos bomba hidráulica independiente estadounidense
- 2) El marco es de acero, pasamanos de aleación de aluminio,
- 3) Con la manija de la RCP
- 4) plataforma de la cama puede ser completa para rayos x
- 5) la plataforma inferior es material de acero
- 6) del panel de control hidráulico
- 7) ruedas de guía de subida y caída
- 8) Con I.V. polo, thickness 8cm cobertura de agua PU colchón de prueba
- 9) la capacidad de carga máxima: 150kgs
- 10) Volver sección es controlada por la primavera, reposapiés controla manualmente
- 11) El mecanismo de cierre con sistema de cierre centralizado
- 12) Precisión de la pesada: 0.02kg o 0.05kg

5 funciones:

- 1) Respaldo máximo ángulo ascendente: 75 °
- 2) reposapiés Max ángulo ascendente: 45 °
- 3) Ajuste de altura: 630-950mm
- 4) Trendelenburg: 15 °
- 5) Anti-Trendelenburg: 15 °

ELECTRONICOS



MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRICO 12 PULGADAS MCA. CONTEC MODELO. CMS 8000



El monitor tiene abundantes funciones que se pueden utilizar para la monitorización clínica con adultos, pediátricos y neonatos. Los usuarios pueden seleccionar diferentes configuraciones de parámetros según diferentes requisitos. El monitor, la energía suministrada por 100-240V ~, 50 / 60Hz, adopta 12.1" color TFT LCD que muestra la fecha en tiempo real y forma de onda. Puede exhibir sincrónicamente la forma de onda de ocho canales y los parámetros completos de la supervisión equipados con un registrador termal opcional de 48m m. El monitor se puede conectar al sistema de monitoreo central a través de un cable o una red inalámbrica para formar un sistema de monitoreo de red.

Este dispositivo puede controlar parámetros tales como ECG, RESP, NIBP, SpO2, y dual-canal TEMP, etc. Integra el módulo de la medida de parámetros, la exhibición y el registrador en un dispositivo para formar un equipo compacto y portable. Su batería interna reemplazable trae mucho de conveniente para mover paciente.

Principales características

- Pantalla LCD TFT a color de 12.1", interfaz multilingüe (chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, turco, español, portugués, italiano, holandés, rumano, ruso, kazajo, polaco, checo).
- Diseño sin ventilador, silencioso, ahorro de energía y limpio, lo que reduce la posibilidad de infecciones cruzadas.
- Monitor completo para adultos, pediátricos y neonatos.
- Con interfaz estándar, gráfico de oxígeno, gráfico de tendencia, interfaz de caracteres grande y cama de vista, conveniente de observar.
- Termine todas las operaciones con las teclas y las perillas.
- Visualización sincrónica de forma de onda de 8 canales máxima.
- Visualización de la forma de onda ECG de 7 derivaciones en una pantalla, presentación en cascada de forma de onda ECG
- Adoptar tecnología SpO2 digital, interferencia de luz anti-movimiento y anti-ambiente, y la medición se puede realizar bajo las circunstancias de relleno débil.
- Función de análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC)
- Modo de medición NIBP: Manual / AUTO / STAT, almacenamiento para datos PNI de 4800 grupos.
- Revise 71 eventos de alarma de todos los parámetros y 60 eventos de alarma de arritmia.
- Cálculo de concentración de fármaco y funciones de tabla de titulación.
- Impresión de un gráfico de tendencia con un solo toque
- Conéctese al Sistema Central de Monitoreo por 3G, Wi-Fi o por cable.
- AC / DC, batería de litio recargable incorporada para lograr un monitoreo ininterrumpido.
- Unidad quirúrgica anti-alta frecuencia, resistente a la desfibrilación (se requieren cables especiales).

MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRICO 8 PULGADAS MCA. CONTEC MODELO. CMS 6000



El monitor tiene abundantes funciones que se pueden utilizar para la monitorización clínica con adultos, pediátricos y neonatos. Los usuarios pueden seleccionar diferentes configuraciones de parámetros según diferentes requisitos. El monitor, la energía suministrada por 100-240V ~, 50 / 60Hz, adopta 12.1" color TFT LCD que muestra la fecha en tiempo real y forma de onda. Puede exhibir sincrónicamente la forma de onda de ocho canales y los parámetros completos de la supervisión equipados con un registrador termal opcional de 48m m. El monitor se puede conectar al sistema de monitoreo central a través de un cable o una red inalámbrica para formar un sistema de monitoreo de red.

Este dispositivo puede controlar parámetros tales como ECG, RESP, NIBP, SpO2, y dual-canal TEMP, etc. Integra el módulo de la medida de parámetros, la exhibición y el registrador en un dispositivo para formar un equipo compacto y portable. Su batería interna reemplazable trae mucho de conveniente para mover paciente.

Principales características

- Pantalla LCD TFT a color de 12.1", interfaz multilingüe (chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, turco, español, portugués, italiano, holandés, rumano, ruso, kazajo, polaco, checo).
- Diseño sin ventilador, silencioso, ahorro de energía y limpio, lo que reduce la posibilidad de infecciones cruzadas.
- Monitor completo para adultos, pediátricos y neonatos.
- Con interfaz estándar, gráfico de oxígeno, gráfico de tendencia, interfaz de caracteres grande y cama de vista, conveniente de observar.
- Termine todas las operaciones con las teclas y las perillas.
- Visualización sincrónica de forma de onda de 8 canales máxima.
- Visualización de la forma de onda ECG de 7 derivaciones en una pantalla, presentación en cascada de forma de onda ECG
- Adoptar tecnología SpO2 digital, interferencia de luz anti-movimiento y anti-ambiente, y la medición se puede realizar bajo las circunstancias de relleno débil.
- Función de análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC)
- Modo de medición NIBP: Manual / AUTO / STAT, almacenamiento para datos PNI de 4800 grupos.
- Revise 71 eventos de alarma de todos los parámetros y 60 eventos de alarma de arritmia.
- Cálculo de concentración de fármaco y funciones de tabla de titulación.
- Impresión de un gráfico de tendencia con un solo toque
- Conéctese al Sistema Central de Monitoreo por 3G, Wi-Fi o por cable.
- AC / DC, batería de litio recargable incorporada para lograr un monitoreo ininterrumpido.
- Unidad quirúrgica anti-alta frecuencia, resistente a la desfibrilación (se requieren cables especiales).

BOMBA DE INFUSION DE I VIA MCA. CONTEC MODELO. SP750



El producto es una bomba de infusión volumétrica, características de alta seguridad, operación fácil y larga vida. El control de flujo con alta precisión y medidas de alarma integrales garantizan la seguridad del paciente y un efecto terapéutico óptimo.

Función

El control de flujo con alta precisión garantiza un efecto terapéutico óptimo.

Sea compatible con la mayoría de los juegos IV estándar.

El nuevo sistema IV proporcionado por el usuario puede ser calibrado por los proveedores, y los parámetros de la infusión pueden ser entrados en la bomba, que asegura exactitud.

3.5 "TFT-LCD.

Operar con las teclas.

El tiempo de infusión residual se puede mostrar durante la infusión.

Con función de recordatorio para comenzar la infusión.

Alarma de oclusión, burbuja de aire, puerta abierta y falla del motor, etc.

El umbral para la burbuja de aire y la alarma de la presión pueden ser ajustados por el personal médico.

La abrazadera de acompañamiento IV previene que el líquido fluya libremente cuando la puerta de la bomba se abre accidentalmente.

A.B.S - El sistema ANTI BOLUS previene la inyección instantánea de alta dosis de la obstrucción súbita que desaparece.

Detenga la infusión automática durante la alarma (excepto para las alarmas "CERRAR CERRAR", "KVO" y "BAJA BATERÍA").

Se puede ajustar el volumen de la alarma.

Fuente de alimentación: AC / DC y batería de litio incorporada.

Cajas compactas de aluminio y construcción robusta.

Puerto USB es conveniente para el personal técnico para actualizar el software ..

La bomba de infusión se puede montar en polo de infusión en muchas direcciones por el soporte versátil.

Los parámetros de infusión se pueden guardar después de apagarse.

Información relacionada

CONCENTRADOR DE OXIGENO MCA. CONTEC MODELO. OC3B



Introducción

El concentrador de oxígeno OC3B adopta los absorbentes de oscilación de presión (PSA) para concentrar directamente el oxígeno médico con alta concentración del aire. La máquina coopera con enfermedades tales como enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, altitud y enfermedad de altura, enfermedades geriátricas, pediátricas Infección del tracto respiratorio, hipoxemia nocturna y anoxia de envenenamiento por gas en tratamiento. Es ampliamente utilizado para los estudiantes, los trabajadores de cuello blanco, los atletas, los ancianos, las mujeres embarazadas, el fúts para la recuperación mental y física, la terapia auxiliar y la salud fisiológica.

Principales características

- 1) Con el camión de torneado, fácil de mover
- 2) Filtro incorporado para tamizar la impureza
- 3) Indicador de estado de concentración de oxígeno
- 4) Función de acumulación de tiempo
- 5) Función de cierre de temporización
- 6) Alarma de fallo de alimentación
- 7) Alarma para protección de alta / baja presión
- 8) Alarma de bajo caudal
- 9) Con indicador de trabajo
- 10) Medir la SpO2 y la frecuencia del pulso

ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO MCA. CONTEC MODELO. BC300



Introducción

El dispositivo mide los índices bioquímicos analizando la sangre y otros fluidos corporales, luego combina con otra información clínica, para ayudar a diagnosticar la enfermedad, evaluar la función de los órganos, identificar el gen de la enfermedad y determinar la norma para la terapia futura.

Función

Basado en el sistema operativo Linux, interfaz gráfica en color. Operar por pantalla táctil, teclas de función o ratón USB externo, teclado.

Métodos de medición opcionales (punto final, dos puntos, cinética, doble longitud de onda, etc.) y métodos de cálculo (factor, regresión lineal, regresión no lineal, etc.).

Almacene 500 elementos de prueba y 10000 resultados de prueba, con múltiples modos de impresión e informes.

Cada artículo se puede fijar el control de calidad de dos hornada No. Estadística automáticamente y dibujar la carta del control de calidad, almacenar los datos del control de calidad y la carta dentro de un año, que se puede comprobar e imprimir.

Auto-latencia de la lámpara para prolongar su vida útil.

Función de protección de apagado: guarda automáticamente los resultados de medición.

Función de autocomprobación: alarma para el trayecto de la luz, trayectoria del líquido y falla de los componentes mecánicos.

Interfaz de comunicación estándar, conveniente para la transmisión y procesamiento de datos.

ESPIROMETRO PORTATIL MCA. CONTEC MODELO. SPI0



Introducción

SPIROMETER es un equipo de mano para la comprobación de condiciones de pulmón, adopta el modo infrarrojo para medir los artículos relativos, y es aplicable para el hospital, clinique, familia para la prueba rutinaria.

Principales características

- Capacidad Vital Forzada (FVC), Volumen Expirado Forzado en un segundo (FEV1), la relación FEV1 y FVC (FEV1%), Flujo espiratorio máximo (PEF), 25% de flujo de FVC (FEF25), 75% de flujo de Se puede medir la FVC (FEF75) y el flujo medio entre el 25% y el 75% de la FVC (FEF2575). Además, la condición de prueba se puede mostrar por la relación entre el valor medido y el valor predicho.
- Transmisión inalámbrica.
- Gráfico de flujo-volumen, visualización del gráfico de volumen-tiempo.
- Memoria de datos, borrar, cargar y revisar.
- Visualización del gráfico de tendencias.
- Escala (Calibración).
- La información se activa cuando el volumen o el flujo superan los límites.
- Apagado automático cuando no hay operación en un minuto.
- Batería de litio recargable y con puntas de carga.
- Visualización de la energía de la batería.

ANALIZADOR DE ORINA CON PANTALLA LCD MCA. CONTEC MODELO. BC401



Introducción

BC401 Urine Analyzer es un instrumento intelectual de alta precisión que se investiga y desarrolla basándose en óptica moderna, electrónica, informática y otras tecnologías avanzadas para la inspección clínica de la orina. Se pueden probar GLU, BIL, SG, KET, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, VC, PH, MAL, CR y UCA en la orina usando tiras reactivas especiales. Y es aplicable para el uso en hospital, el servicio de salud de comunidad, la clínica, la estación de la epidemia y la familia, el etc.

Función

LED de alta luminancia y blanco, características de larga vida y buena estabilidad.

Mostrar contenido abundante en el LCD de 2.4", idiomas opcionales: chino e inglés.

Interfaz amigable.

Unidades opcionales: unidad internacional, unidad convencional y sistema de símbolos.

Supervisión de todo el proceso de prueba, auto-carácter y aviso audible.

Sea compatible con tira de prueba de 8, 10, 11, 12, 14-parámetros (opcional basado en el tipo de tira reactiva).

Interfaz MicroUSB estándar, interfaz Bluetooth (opcional).

MONITOR FETAL MCA. CONTEC MODELO. CMS8000G



Introducción

Fetal Monitor puede adquirir en tiempo real FHR, TOCO y FMDV, que pueden proporcionar datos de referencia para uso clínico. Se puede utilizar individualmente o conectado con el sistema de monitoreo central en el departamento de obstetricia para formar un sistema de monitoreo de red.

Principales características

- Diseño compacto, puede colocarse horizontalmente o colgarse en la pared.
- LCD en color, pantalla convertible de 60°
- Mostrar claramente la curva de monitoreo y los datos
- Marca de área para FHR normal (120 BPM ~ 160 BPM).
- Registro manual para el movimiento fetal.
- Alarma para FHR anormal
- Monitoreo en tiempo real para 24 horas continuas.
- Almacenamiento, reproducción e impresión de la curva de monitorización durante 12 horas continuas.
- Idiomas opcionales de la interfaz: chino e inglés.
- Monitoreo de gemelos opcional.
- Transductor de 9 cristales y haz ancho.
- Impresora térmica incorporada de larga duración y alta resolución.
- Comunicarse con el sistema central de monitoreo mediante el RJ45 incorporado.

ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO LAP TOP MCA. CONTEC MODELO. CMS 600 P2



Introducción

El tipo portátil CMS600P2 es un sistema de diagnóstico B-ultrasonido totalmente digital. Adopta el sistema operativo embebido, que optimiza enormemente el rendimiento del producto. El sistema se toma más convenientemente por su alta capacidad efectiva de procesamiento de datos, menú emergente y diseño de teclado. Incluye paquetes de software de medición ricos que satisfacen la necesidad clínica de diagnóstico totalmente.

Principales características

- El dispositivo que adopta Linux embebido sistema operativo, tiene compatibilidad así, carácter trasplantables, y expansibilidad flexible.
- Se adopta el avanzado completa, apertura dinámica en tiempo real, en tiempo real apodization digital de formación de haz de recepción dinámica, dinámica en tiempo real reciben el enfoque, correlación del marco, la moderna tecnología de procesamiento de imágenes, etc., lo que mejora la calidad de la imagen.
- El sistema se puede tomar convenientemente para el tipo del cuaderno, batería incorporada, alta integración de la unidad, volumen pequeño, peso ligero.
- Adopta el teclado táctil tipo plegable, operación bola de seguimiento flexible y contextual, que aceleraba enormemente la velocidad de la prueba.
- imagen aseado y cómodo manejo de la función que puede imprimir y exportación de informes.
- Incluye ricos paquetes de software de medición: obstetricia, ginecología, cardiología, urología, piezas pequeñas. Muchas sondas pueden ser elegidos, y la extensa aplicación pueden satisfacer la necesidad de diagnóstico clínica totalmente.
- Cerca de la ganancia, la ganancia de lejos y la ganancia total puede ser ajustable solo.
- Poseer función de memoria externa.
- Se puede conectar a la impresora de vídeo, una impresora de inyección de tinta, la impresora LaserJet.

PRUEBA DE ESTRESS CON ECG MCA. CONTEC MODELO. CONTEC8000S



Introducción

El Sistema de Análisis de ECG de Estrés consta de un dispositivo de hardware de muestreo, un sistema de software especial y un equipo de ejercicios. Sus funciones incluyen 12 derivaciones de ECG de forma sincrónica y almacenamiento de datos, análisis de segmento ST, revisión de ECG en dinámico / estático / superpuesto durante todo el proceso de ejercicio y análisis de tendencias de múltiples parámetros, informes imprimibles múltiples, etc. Ser registrados oportunamente y con precisión, lo que refleja la función cardíaca del paciente, proporcionando datos fiables para los médicos en los diagnósticos.

Principales características

1. Print ECG forma de onda en tiempo real durante el proceso de muestreo, registro y guardar datos de ECG de todo el proceso.
2. Observación de los cambios del segmento ST en tiempo real, visualización de la ampliación del cable seleccionado por el usuario, cálculo automático de los datos relacionados con ST.
3. Adopte la tecnología de la antiinterferencia para asegurar la estabilización de la línea de fondo, reduce el efecto en la forma de onda de ECG de la interferencia del EMG, la deriva de la línea de base y la interferencia de la CA.
4. Disponible para el esquema de ejercicio estándar y definido por el usuario, el aviso instantáneo automático de impresión y la medida de BP se pueden configurar de acuerdo con la frase de ejercicio.
5. El operador puede marcar eventos durante el ejercicio, la forma de onda ECG del evento marcado puede compararse con la forma de onda actual. El evento se puede observar, editar e imprimir después de impuestos especiales.
6. Exhibición e impresión de todas las clases de carta de tendencia. Principalmente incluyendo: HR, BP, METS, HR * BP, tendencia de ejercicio, nivel de segmento ST / influencia / pendiente / SD / J nivel y ST / HR, etc.
7. Función de revisión dinámica / estática después del ejercicio, representación de todo el proceso de pruebas de ejercicio.
8. Caso de la función de importación / exportación. Comprimir el caso para el almacenamiento, que ocupa menos espacio en disco. La caja comprimida se asociará con el tipo de archivo en el sistema de operación. Esto hará que la operación de importación sea mucho más sencilla y rápida.
9. La función de configuración del sistema incluye varios elementos de configuración. Por ejemplo, cambiar el idioma chino / inglés, el formato y el modo de visualización de la forma de onda (12 líneas * 1column / 6leads * 1column / 6leads * 2columns / 3leads * 2columns / 3 leads * 1column, etc.), color de fondo, Configuración y visualización de parámetros opcionales, etc.
10. Proporcionar múltiples herramientas funcionales, que se utilizan para la gestión de dispositivos, estadísticas de casos y otras operaciones.
11. Modo inalámbrico de muestreo de datos de ECG, mejora la capacidad anti-interferencia.
12. Apoyo para los tipos de variedad de equipos de ejercicio

ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES MCA. CONTEC MODELO. ECG300G



Introducción

ECG300G es un electrocardiógrafo que puede recoger la señal de ECG de 12 derivaciones y la forma de onda de impresión mediante el sistema de impresión térmica. Se caracteriza por, grabación y visualización de la forma de onda de ECG en modo AUTO / Manual, medición y diagnóstico de parámetros de forma de onda de ECG automáticamente, solicitando "Desenchufar" y "Falta de papel", interfaz multilingüe, AC / DC, Gestión de bases de datos de casos.

Principales características

- 1) para el ECG de 12 derivaciones, adopta la tecnología de procesamiento digital de la señal y consigue la forma de onda de alta calidad de ECG vía el filtro de la frecuencia de la energía, el filtro basal y el filtro de EMG de la señal de ECG.
 - 2) Exhibición del ECG de 3/6/12-lead, del modo de impresión, de la sensibilidad, de la velocidad del papel y del estado del filtro, del etc. en una pantalla, conveniente para contrastering diagnosing.
 - 3) 4 × 3, auto 3 × 4, auto 3 × 4, auto 2 × 6 + 1, auto 2 × 6, auto 3-2 + 1, auto 3 × 4, 2, auto 1 × 12 + 1, auto 1 × 12, ritmo 4, ritmo 3 y ritmo 2, etc. La longitud de onda impresa se puede ajustar, y con la función de la impresión del tiempo, que resuelve diversos requisitos.
 - 4) Con las funciones de autoanálisis y autodiagnóstico para parámetros de ECG de rutina, proporcionar resultados de medición y conclusión de autodiagnóstico para HR, intervalo PR, duración P, duración QRS, duración T, intervalo QT, Q-Tc, eje P, Eje QRS, Eje T, R (V5), S (VI), R (V5) + S (VI), etc., lo que reduce la carga del médico.
 - 5) La memoria incorporada almacena hasta 1000 casos, conveniente para la revisión del caso y la estadística.
- Interfaz e informe multilingües (chino, inglés, español, turco, polaco, italiano, francés, alemán, portugués, Kazakstán, ruso, ucraniano, serbio y esloveno).

ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES MCA. CONTEC MODELO. ECG600G



Introducción

ECG600G es un electrocardiógrafo que puede recoger la señal de ECG de 12 derivaciones y la forma de onda de impresión mediante el sistema de impresión térmica. Se caracteriza por, grabación y visualización de la forma de onda de ECG en modo AUTO / Manual, medición y diagnóstico de parámetros de forma de onda de ECG automáticamente, solicitando "Desenchufar" y "Falta de papel".

Principales características

- 1) Adopte el sistema de impresión térmico de alta resolución (8 puntos / mm), ninguna necesidad de ningunos ajustes. Frecuencia de grabación: hasta 150Hz.
- 2) Grabar en tiempo real y de manera continua la forma de onda y el carácter de anotación de ECG claros y precisos (incluyendo la marca de plomo, la sensibilidad, la velocidad del papel y el estado del filtro, etc.).
- 3) Diseño completamente digital del filtro, deriva del anti-baseline, interferencia de la CA y del EMG.
- 4) Ajuste la línea de base automáticamente, optimice el ajuste de impresión y los cables de ritmo opcionales.
- 5) En el modo AUTO, termine la grabación presionando el botón una vez, lo cual mejora la eficiencia del trabajo.
- 6) Adopte la tecnología de procesamiento digital de la señal y consiga la forma de onda de alta calidad de ECG vía el filtro de la frecuencia de la energía, el filtro de la línea de base y el filtro de EMG de la señal de ECG.
- 7) Con las funciones de auto-medición, auto-análisis y autodiagnóstico para los parámetros de ECG rutinarios, que reduce la carga del doctor y mejora eficacia del trabajo.
- 8) Recogida de sincronización para ECG de 12 derivaciones, multiplique los formatos de impresión, incluyendo 2 × 6 + 1 (cable rítmico), 2 × 6, 3 × 4, 3 × 4 + 1 (cable rítmico), 4 × 3, 4 × 3 + 1 (ritmo de plomo), 6 × 2, 6 × 2 + 1 (ritmo de plomo), ritmo 2, ritmo 3, ritmo 4, ritmo 5, ritmo 6, ritmo 7, registro de canales, etc.
- 9) Pantalla de 3/6/12-lead ECG, "Lead off" y "Falta de papel" en una pantalla, y con ECG DEMO modo. Comprobación automática y análisis automático de parámetros de ECG, la forma de onda ECG se puede grabar manual o automáticamente. La información del paciente puede almacenarse en base de datos de casos.
- 10) La hora de impresión puede ajustarse a cada 1/2/3/5/10/20/30/60 minutos.
- 11) Configuración de impresión, incluyendo "Imprimir y guardar" (imprimir la forma de onda y guardar la caja), "Imprimir no guardar" (sólo imprimir la forma de onda pero no guardar la caja).
- 12) AC / DC, batería de litio recargable incorporada y circuito de la auto-protección, y energía automática apagado cuando no hay ninguna operación en tiempo designado.
- 13) Almacene más de 1000 casos, conveniente para la revisión y la estadística del caso.
- 14) Interfaz e informe multilingües (chino, inglés, francés, español, turco, polaco, italiano, alemán, portugués, Kazakstán, ruso y ucraniano).

ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES MCA. CONTEC MODELO. ECGI200G



Introducción

ECGI200G es un electrocardiógrafo, que permita recoger de 12 derivaciones de ECG de señal al mismo tiempo y de forma de onda de ECG de impresión con sistema de impresión térmica. Cuenta en, grabación y visualización de forma de onda de ECG en el modo automático / manual, medición y diagnóstico de los parámetros de forma de onda de ECG de forma automática, lo que llevó a "llevar fuera" y "La falta de papel", interfaz multi-idioma, AC / DC, la selección de derivación de ritmo, la impresión el gráfico de tendencia y el histograma de intervalo PR, gestión de bases de caso.

Principales características

- 1) Recolección de sincronización de ECG de 12 derivaciones, adoptar la tecnología de procesamiento de señales digitales y obtener la forma de onda de ECG de alta calidad a través de filtro de frecuencia de red, filtro de línea de base y el filtro de EMG de la señal de ECG.
- 2) Indicación de 3/6 / ECG de 12 derivaciones, modo de impresión, la sensibilidad, la velocidad del papel y el filtro de estado, etc. en una pantalla, conveniente para el diagnóstico de contrastivamente.
- 3) modos y formatos de impresión Multiplicar, incluyendo 12xl automático, automático 6x2 + 1, 6x2 automático + 1_H, 6x2 automático, automático 6x2_H, auto 3x4 + 1, auto 3x4 + 2, el ritmo 12, ritmo 10, el ritmo de 8, ritmo 6, , etc gráfico y de histograma de intervalo PR manual de tendencia pueden ser impresos, la longitud de onda impresa se puede ajustar, y con la función de impresión de tiempo, que se reúne diversos requisitos.
- 4) La velocidad del papel: 5 mm / s, 6,25 mm / s, 10 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s.
- 5) Con las funciones de auto-análisis y auto-diagnóstico para los parámetros del ECG de rutina, proporcionan resultados de la medición y la conclusión de auto-diagnóstico para HR, intervalo PR, P Duración, Duración del QRS, T Duración, intervalo QT, Q-Tc, P Eje , eje QRS, T Eje, R (V5), S (VI), R (V5) + S (VI), etc., que reduce la carga del médico.
- 6) Built-in memoria almacena hasta 1.000 casos, convenientes para la revisión del caso y estadística.
- 7) en varios idiomas (turco, francés, chino, Inglés, Alemán, Kazakstán, polaco, portugués, ruso, esloveno, español y ucraniano) y la interfaz de informe.
- 8) En el estado de CC óptima, hasta 10 horas de tiempo de espera, impresión continua más de 3 horas, grabar hasta 300 de forma de onda de ECG (comúnmente, es el caso 3s), que cumple los requisitos de visita a un paciente en el hogar y el cuerpo examen.